

3M

Petrifilm™ ペトリフィルム™

黄色ブドウ球菌エキスプレス測定用プレート

＜ペトリフィルム＞黄色ブドウ球菌エキスプレス測定用プレート（STXプレート）は簡単な操作で黄色ブドウ球菌の検査結果を短時間の培養で確認することが可能です



- ◆ 鮮明な赤紫色のコロニーが最短で約 **22** 時間で観察でき、検査結果の判定が簡単です。
- ◆ ペトリフィルム黄色ブドウ球菌エキスプレス測定用プレートは他のペトリフィルム製品と同様に、費用効果に優れ、場所を取らず誰でも簡単に検査ができます。
- ◆ BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラゼ試験の方法と同等の方法です。

基本操作：3ステップ

- step 1.** 検体1mlを接種してプレート上に広げる。
- step 2.** 35℃（または37℃）24時間（±2時間）培養する。
- step 3.** コロニー数を数える。

3MペトリフィルムプレートはISO9002を取得した工場では製造しています。

迅速な検査結果・効率の向上

—正確かつ高い信頼性のある結果を短時間で測定可能—

特長

- 3つのステップで検査が可能（通常）
- 35℃ 22時間（最短）で黄色ブドウ球菌を確認可能
- 検体量 1ml で測定感度が上昇
- コアグララーゼ確認試験と同等の結果
- すべてのコロニーを確認
- ペトリフィルムシリーズの形状により効率効果の向上

測定手順概要

step 1.


接種

step 2.

培養

step 3.

結果

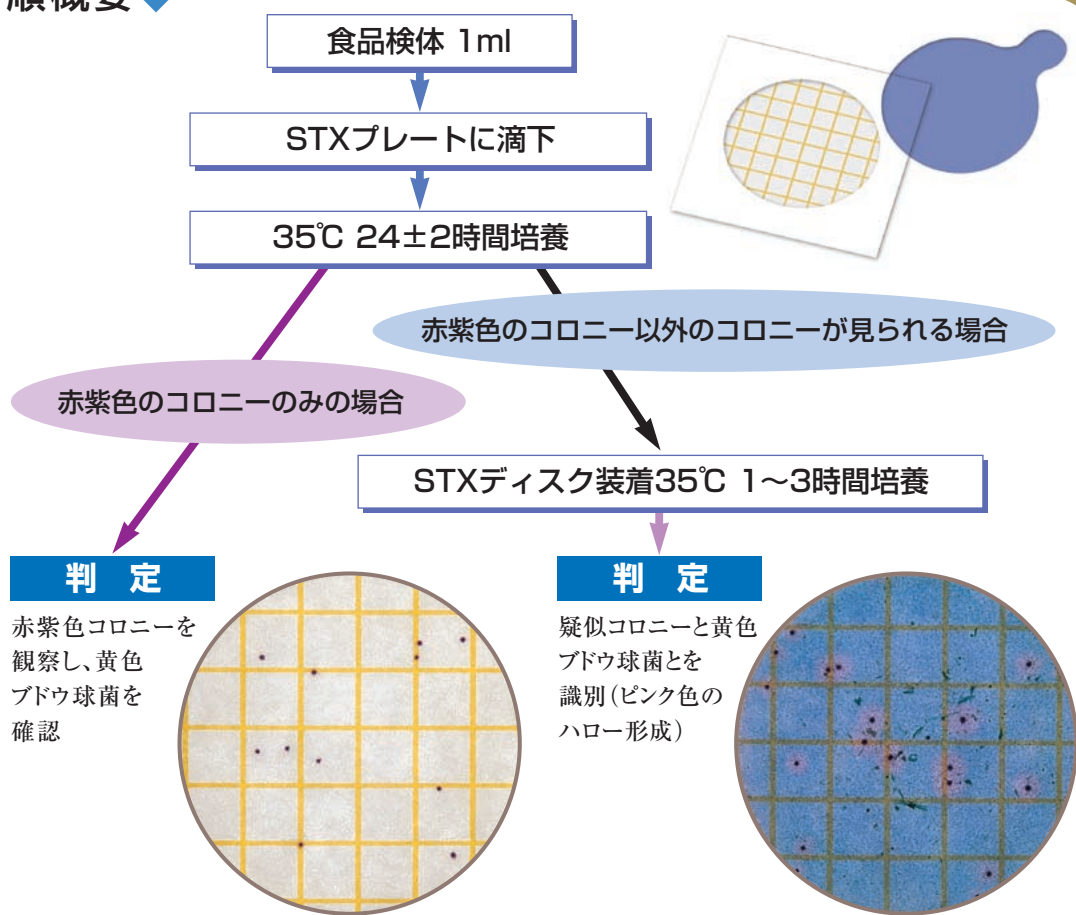

製品名	製品番号	入れ目	税込価格(本体価格)/箱
<3M><ペトリフィルム>黄色ブドウ球菌エキスプレ 測定用プレート (STXプレート)	6490STX	50枚入(25枚×2袋)/箱	¥11,655 (¥11,100)
	6491STX	500枚入(25枚×20袋)/箱	¥94,500 (¥90,000)
<3M><ペトリフィルム>黄色ブドウ球菌エキスプレ ディスク (STXディスク)	6492STX	20枚入/箱	¥3,360 (¥3,200)
	6493STX	100枚入/箱	¥14,385 (¥13,700)
<3M><ペトリフィルム>黄色ブドウ球菌エキスプレ STXプレート・ディスクセット	6494STX	500セット/箱	¥132,300 (¥126,000)
<3M><ペトリフィルム>黄色ブドウ球菌エキスプレ フラット スプレッダー	6425	2枚入/箱	¥336 (¥320)

上記の他にも各種ペトリフィルムプレートがございます

生菌数測定用、大腸菌群数測定用、E.coliおよび大腸菌群数測定用、腸内細菌群数測定用、黄色ブドウ球菌数、カビ・酵母測定用があります。使用上の注意等の詳細につきましては、販売店または当社までお問い合わせください。

<3M> <Petrifilm> <ペトリフィルム>は、3M社の商標です。



カスタマーコールセンター

製品についてのお問合せはナビダイヤルで

0570-011-321

市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間 8:45~17:15(土・日・祝日・年末年始は除く)

ホームページ

<http://www.mmm.co.jp/hc/microbiology/>

スリーエム ヘルスケア株式会社

食品衛生市場プロジェクト部 本社 〒158-8583 東京都世田谷区玉川台2-33-1

人がいる。夢がある。

